

10 Instructietips voor de accu van uw scootmobiel



Zorg voor een lange levensduur en goede werking van uw scootmobiel!
Volg de 10 belangrijke instructietips voor het opladen van de accu's.

1. NIEUWE ACCU'S:



Altijd eerst volledig opladen

100%



Capaciteit is in het begin nog niet volledig. Eerst enkele malen volledig opladen, voordat u langere afstanden kunt rijden.

100%


2. DAGELIJKS GEBRUIK:



Laad de accu volledig op. Bij voorkeur 's nachts.

100%

3. WEKELIJKS GEBRUIK:

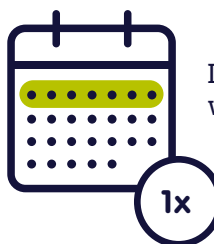

Laad de accu 1x per week volledig op.

1x

4.



Gebruik de meegeleverde oplader altijd binnen. Stel de oplader nooit bloot aan regen of vocht.

5.



Zorg dat alle ventilatieopeningen van de lader tijdens het laden vrij zijn.

LET OP: BIJ ONJUIST LADEN,
VERVALT DE GARANTIE OP DE ACCU'S!



Uw hulpmiddelenspecialist

6.



Maak altijd de laadcyclus af. Zeker als de accu helemaal leeg is (rood lampje). De accu is vol als groen lampje brandt.

7.



Laad de accu op bij temperatuur tussen minimaal 15 en maximaal 28 °C.

8.

HEEFT SCOOTMOBIEL EEN TIJD STIL GESTAAN:



Accu's kunnen 'lui' worden. Door gebruik activeert u ze weer. Laad ze na gebruik meteen weer op. Ook al heeft u slechts korte afstand gereden.

9.

RIJDT U 'S WINTERS NIET:



Uw scootmobiel altijd aan de oplader aansluiten.

10.

HAAL DE SCOOTMOBIEL VEILIG VAN DE LADER:



Eerst netsnoer uit stopcontact



Daarna laadplug uit scootmobiel

EXTRA TIPS VOOR LANGER RIJPLEZIER:

1. Rijd niet met (te) zachte banden.
2. Probeer zoveel mogelijk te blijven rijden in plaats van steeds optrekken en stoppen.
3. Sluit geen andere verbruikers, zoals radio, op de accu aan.
4. Vervoer geen zware dingen met uw scootmobiel (ook niet met een aanhanger).
5. Bij lage temperaturen kunt u minder lange afstanden afleggen. Bij hoge temperaturen kunt u grotere afstanden afleggen.

Kersten. Speciaal voor uw hulpmiddelen

Roermond / Almelo / Heteren / Nijkerk

0475-348 348 • info@kerstenhulpmiddelen.nl • www.kerstenhulpmiddelen.nl

